

LABORATOIRES
L'ESTHETIC
PARIS

COLLECTION
DERMHAGE


THE EXCELLENCE OF FRENCH DERMAL FILLERS



LABORATOIRES
L'ESTHÉTIQUE
PARIS

LA COLLECTION
DERMHAGE
THE EXCELLENCE
OF FRENCH DERMAL FILLERS

- POUR LES FEMMES
ET LES HOMMES
For women and men
- POUR TOUS
LES AGES
For all ages
- POUR TOUS
LES TYPES DE PEAU
For all skin types

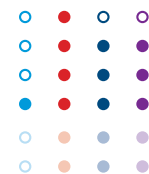

LA COLLECTION

DERMHAGE

THE EXCELLENCE OF FRENCH DERMAL FILLERS

LES LABORATOIRES L'ESTHÉTIQUE ont développé une gamme de produits de comblement de rides et de booster de la peau, **exclusivement pensée en France**.

Grâce à la technologie **SRHA** (Smooth Rheology Hyaluronic Acid), **DERMHAGE** permet de traiter avec douceur les rides profondes et moyennes ainsi que renforcer le volume des lèvres et du visage. Conçue à partir d'un gel acide hyaluronique d'une grande pureté, **DERMHAGE** allie le meilleur de la recherche scientifique française à la sécurité des produits.

Première ligne d'injectables à la fois pour femmes et hommes, **DERMHAGE** a développé des protocoles de soins spécifiques pour hommes. Un profil plus masculin : pommettes rehaussées, mâchoires proéminentes, nez droit, menton projeté font partie des protocoles créés.

LABORATOIRES L'ESTHÉTIQUE developed a new range of monophasic anti wrinkle fillers and skin booster. A safe, natural and long-lasting gel for patients. A precise and comfortable medical device for physicians.

Both for women and men, **DERMHAGE** developed a full protocole for men' injections.

Thanks to the breakthrough **SRHA** (Smooth Rheology Hyaluronic Acid) technology, these products are used for treating deep or superficial wrinkles, volume and for lip augmentation. Our patented technology preserves the natural qualities of our French hyaluronic acid.

Made of very pure and smooth hyaluronic acid, **DERMHAGE** is composed of four different references which can remodel each part of your face.

DERMHAGE products are class III medical devices with CE mark and ISO 13485, the highest European standards.

LABORATOIRES
L'ESTHÉTIC
PARIS

DERMHAGE

a développé des protocoles
de soins spécifiques pour femmes

Our Doctors developed
specific treatments for women

ECLATS FÉMININ

- SILLONS NASOGÉNIENS
NASOLABIAL FOLDS AND MARIONETTE LINES
- LÈVRES PULPEUSES
LIP VOLUME AND CONTOURS
- LISSAGE DE PEAU
DERMIS HYDRATION
- JOUES, TEMPES, OVAL DU VISAGE
CHEEKS, TEMPLES, OVAL FACE

DERMHAGE

a développé des protocoles de soins
spécifiques pour hommes

Our Doctors developed
specific treatments for men

PROFIL PLUS MASCULIN

- POMMETTES REHAUSSÉES
ENHANCED CHEEK BONES
- MÂCHOIRES PROÉMINENTES
STRONG JAWLINE
- NEZ DROITS
STRAIGHT NOSE
- MENTON PROJETÉ
PROJECTED CHIN

LA COLLECTION DERMHAGE SYRINGE Terumo 27 G



A premium syringe for better safety & confort,
the French Touch of injection

- **Safety first**
solid, ergonomic grip for a safe application and better hold
- **Low extrusion force**
HA application is smooth and homogeneous
- **Extra precision**
Visual graduation
- **Excellence in results and comfort**
Thin 27G X 1/2 Terumo needle

Pourquoi une concentration de 20mg ?


Les recherches scientifiques ont prouvé qu'il s'agissait de la
quantité optimale d'acide hyaluronique. Certains expliquent
qu'une plus haute concentration signifie un gel de meilleur
qualité, il s'agit d'arguments marketing.

La différence entre **DERMHAGE FINE TOUCH, FULLFACE,
LIPS** et **VOLUME** se trouve dans la taille des particules du gel.
Notre produit d'excellence a été développé pour s'adapter à la
densité tissulaire.

Why is our concentration 20mg ?

20 mg/ml has proven to be optimal for effect, safety and resi-
dence time. Thanks to years of research we introduce an inno-
vative spherification technology. Our particles are smooth and
spherical instead of the traditional structure with angular rhom-
boids. The difference between **DERMHAGE FINE TOUCH,
FULLFACE, LIPS** and **VOLUME** is the particle sizes in the gel.
Our high-end, perfectly tolerable and safe injectable products
have been developed to exactly match the tissue's density.

Products	DERMHAGE FINE TOUCH	DERMHAGE FULL FACE	DERMHAGE LIPS	DERMHAGE VOLUME
Approval regulatory	CE 0483	CE 0483	CE 0483	CE 0483
Indication	Skinbooster, hydration, dark circles	Moderate to deep severity of wrinkles	Lips augmentation and contour, perioral	Deep severity of wrinkles and volume restoration
Packaging	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml	1 x 1ml
Total HA Concentration (mg/ml)	20	23	23	25
Crosslinked HA concentration (mg/ml)	20	20	20	20
Gel : fluid	90:10	90:10	90:10	90:10
Other ingredients	Physiological sodium chloride phosphate buffer	Physiological sodium chloride phosphate buffer	Physiological sodium chloride phosphate buffer	Physiological sodium chloride phosphate buffer
Average Particle Size (µm)	Average 350	Average 760	Average 600	Average 480
Molecular weight of starting HA	100-200 MD	100-200 MD	100-200 MD	100-200 MD
Cross linker	BDDE	BDDE	BDDE	BDDE
Residual cross linker	N/A	≤2ppm	≤2ppm	≤2ppm
Injection area suggested	All facial areas	Glabella wrinkles, upper eyelid, temporal zone, nasolabial folds, marionette fold, perioral wrinkles, cheek	Lips	Temporal zone, nose bridge, cheek, chin
Estimated duration	6-9M	6-12M	6-9M	6-12M
Needle type	27G 1/2" X 2	27G 1/2" X 2	27G 1/2" X 2	27G 1/2" X 2
Storage temperature	2-25	2-25	2-25	2-25
Endotoxines	<0.5EU/mg	<0.5EU/mg	<0.5EU/mg	<0.5EU/mg
pH	Average 7.0	Average 7.0	Average 7.0	Average 7.0
Osmolality	340-350 mOsmol/kg	340-350 mOsmol/kg	340-350 mOsmol/kg	340-350 mOsmol/kg
Shelf life	36 months	36 months	36 months	36 months

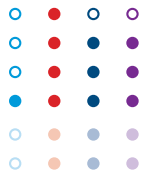

LA COLLECTION

DERMHAGE

THE EXCELLENCE OF FRENCH DERMAL FILLERS

LABORATOIRES
L'ESTHÉTIQUE
PARIS

SRHA – Smooth Rheology Hyaluronic Acid

La technologie SRHA développée par nos laboratoires est l’une des plus performantes sur le marché. Nos scientifiques spécialistes en rhéologie ont produit un gel unique, qui grâce à la **pureté de sa composition** peut s’appliquer sur tous types de peau. Sa concentration spécifique assure une viscosité hautement malléable. **Le gel épouse ainsi parfaitement les formes que le médecin lui donne** lors du massage post-injection. Le produit se répartit sur l’ensemble de la zone traitée, assurant un **confort et une efficacité décuplés**.


The SRHA technology developed by our laboratories is one of the most effective currently on the market. Our scientists, specialized in rheology have produced a unique gel which can be applied on all skin types thanks to **the purity of its composition**. This solution draws its power in its adaptable molecular weight in our products. Its specific concentration ensures a highly malleable viscosit. **The gel embraces curves** when the doctor uses it during the post-injection massage. The product spreads on the entire treated area, ensuring **excellent comfort and high efficiency**.

DERMHAGE VOLUME

Restructuration du visage en profondeur.

Restoring and creating volume. Correction of deep wrinkles

- VOLUMETRIC RESTAURATION • • • •
- INCREASE VOLUME OF THE
CHEEKBONES AND CHEEKS • • • •
- SEVERE AND DEEP WRINKLES • • • •
- TEMPLES • • • •
- CHIN AND JAWLINE • • • •
- OVAL FACE
AND FACIAL CONTOUR • • • •

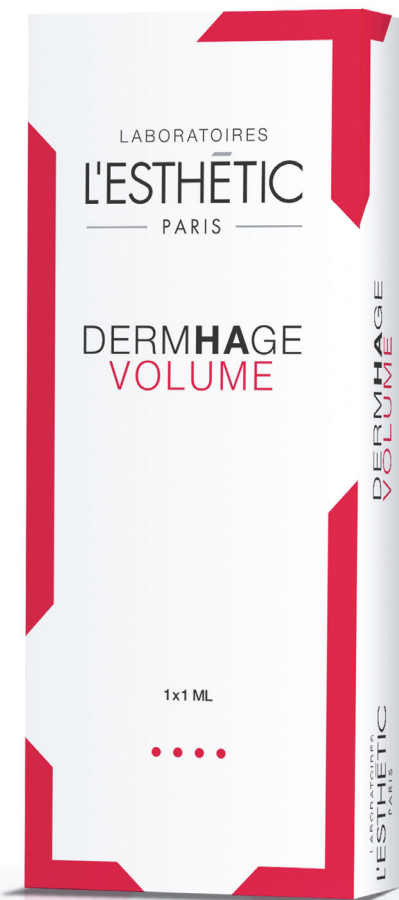

DERMHAGE VOLUME, fort de son gel cohésif nouvelle génération, restaure la structure du visage. Il comble les rides sévères grâce à son injection dans les profondeurs de l'épiderme.

PROTOCOL / TECHNIQUES

Depth of injection : into deep dermis, subcutaneous tissues or supra-periosteal.

Injection techniques : linear threading, bolus, fanning, fern pattern.

Effect duration : 9-12 months and more.



DERMHAGE VOLUME, remodels facial contours and treats deep wrinkles and folds. Very efficient for facial volume creation.



DERMHAGE FULL FACE

Restructuration du visage en finesse.

Correction of moderate to severe wrinkles and folds.
Universal and easy to use.

- MEDIUM TO DEEP LINES
AND FOLDS
- NASOLABIAL FOLDS
- MARIONETTE LINES
- CHEEK WRINKLES
- GLABELLAR LINES

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •



DERMHAGE FULL FACE, traite les rides modérées à sévères. Injection facilitée grâce à la fluidité du gel qui s'adapte à la surface comblée.

DERMHAGE FULL FACE fills and smooths medium to deep wrinkles and folds. Thanks to its new generation of gel which adapts to the treated area.

PROTOCOL / TECHNIQUES

Depth of injection : into mid to deep dermis.

Injection techniques : linear threading, bolus, fern pattern.

Effect duration : 8 to 12 months.



DERMHAGE LIPS

**Correction et/ou augmentation
du volume des lèvres.**

Natural lips augmentation and remodelling.
Perioral area.

- LIP VOLUME AUGMENTATION ● ● ● ○
- REHYDRATION OF THE LIPS ● ● ● ○
- DEFINITION OF LIP CONTOUR,
ENHANCING CUPID'S BOW ● ● ● ○
- PERIORAL AREA ● ● ● ○



DERMHAGE LIPS, est la solution permettant de rehausser le volume des lèvres, les rendant davantage pulpeuses. Sa concentration en acide hyaluronique gomme les ridules de la zone péri-orale.

PROTOCOL / TECHNIQUES

Depth of injection : into and around the labial mucosa.

Injection techniques : micro-bolus, retrograde tracing, fern pattern.

Effect duration : 6-12 months.



DERMHAGE LIPS, is a specific product developed for this sensitive area. It enhances lips volume, rehydrates flesh. Also efficient for peri oral fine lines.



DERMHAGE FINE TOUCH

Prévention des signes de l'âge.

Cross-linked soft tissue correction and fine lines.

Hydrating and antioxidant action

- SUPERFICIAL WRINKLES ● ○ ○ ○
- CROW'S FEET ● ○ ○ ○
- DARK CIRCLES
AND TEAR TROUGHS ● ○ ○ ○
- DEHYDRATED SKIN ● ○ ○ ○
- REGENERATE SKIN
AFTER STRONG UV EXPOSURE ● ○ ○ ○
- MINIMIZE ACNE SCARS
AND STRETCH MARKS ● ○ ○ ○
- SUITABLE FOR SPECIFIC ZONES :
NECK REMODELLING AND DÉCOLLETÉ,
BACK OF HANDS, UPPER ARMS. ● ○ ○ ○



DERMHAGE FINE TOUCH convient au visage, cou et décolleté, mains, bras et déshydratation. Ce booster à l'acide hyaluronique réticulé est efficace dans la prévention des signes de l'âge. Multi-usages.

DERMHAGE FINE TOUCH provides immediate results for face, neck and décolleté, back of hands, upper arms and dehydrated skin. Acts as a skin booster. Also indicated in the prevention of aging signs.

PROTOCOL / TECHNIQUES

Depth of injection : between dermal and epidermal layers, superficial to supraperiosteal.

Injection techniques : papula or micro-papula, threading, blanching.

Effect duration : single procedure (up to 6 month), 3 procedures 15 days apart (up to 9 months and more).



LABORATOIRES
L'ESTHÉTIC
— PARIS —

CG MED 60, RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS

TOUTES LES IMAGES PRÉSENTES DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ESTHÉTIC PARIS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE L'AUTEUR.

CG MED 60, RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS

